
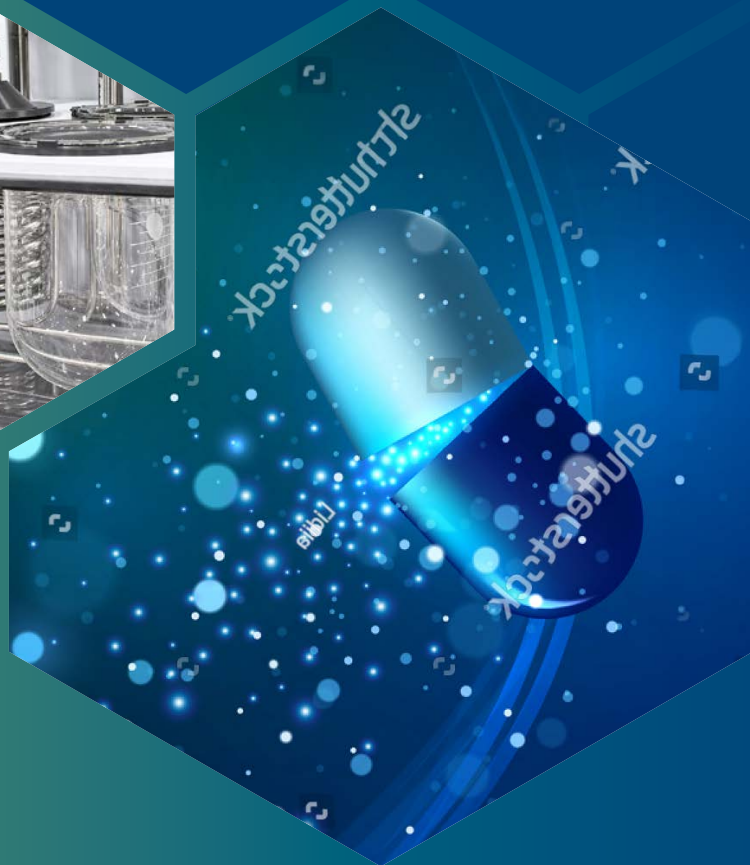


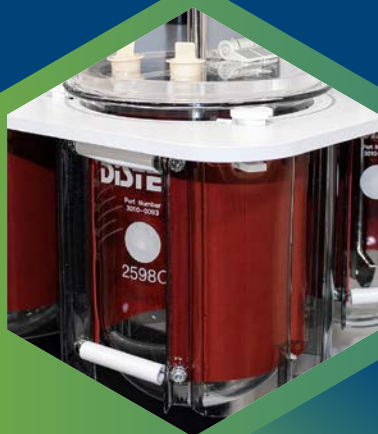

DISOLUCE VE FARMACII

Disoluční aparatury včetně příslušenství

DiSTEK

CHROMSERVIS®

Disoluční systémy Olera

Nový přístup k disoluci zaměřený na efektivitu a snadnou obsluhu

- Patentováno: integrované měření teploty přímo v každé nádobě
- Temperování bez vodní lázně snižuje spotřebu energie až o 40 %
- Testování až do 99 °C pro speciální metody
- Velký dotykový displej s vysokým rozlišením (úhlopříčka 10" / 25 cm)
- Vzdálený přístup pomocí licence Pulse a automatické notifikace
- Světelný indikátor Halo pro okamžitý přehled o stavu přístroje
- Disoluce i v malých objemech (100 a 200 ml)



Olera Plus



Olera



Olera Select

Disoluční autosampler Eclipse 5300

Rychlý a přesný odběr vzorků pro usnadnění procesů

- Volitelný integrovaný měnič filtrů nahrazuje zdoluhavou manuální filtraci
- Precizní pumpy a zkrácená dráha vzorku pro rychlý a velmi přesný odběr
- Připojení cenově dostupnějšího vzorkovače „Child“ umožňuje odebírat vzorky ze dvou disolučních přístrojů
- Barevný dotykový displej



Eclipse 5300



Eclipse 5300 (Child)



Eclipse 5300 s měničem filtrů

ezfill+ pro přípravu disolučních médií

Rychlý ohřev, odplynění a dávkování média

- Snadné ovládání
- Kompatibilita s médii až do 2 % surfaktantů
- Automatické odplynění a dávkování média podle zvolené metody
- Odplyňuje a dávkuje médium automaticky podle zvolené metody
- Vestavěný řídicí systém s dotykovým displejem



ezfill+




ezfill+ (Mobile Cart)

UV systém s optickými vlákny Opt-Diss 410

Měření rychlosti disoluce přímo v testovací nádobě

- Patentováno: ARCH sondy s horizontálním měřením
- Kontinuální měření disoluce každých 5 s
- Snížení nákladů na odběr vzorků a HPLC analýzy

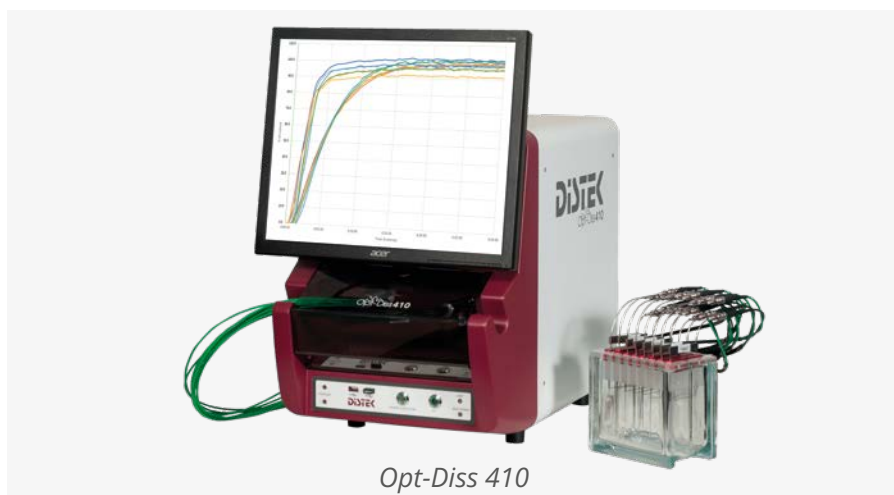


Opt-Diss 410

Software pro disoluci: procesy pod kontrolou



Software CIPHER Dissolution Control

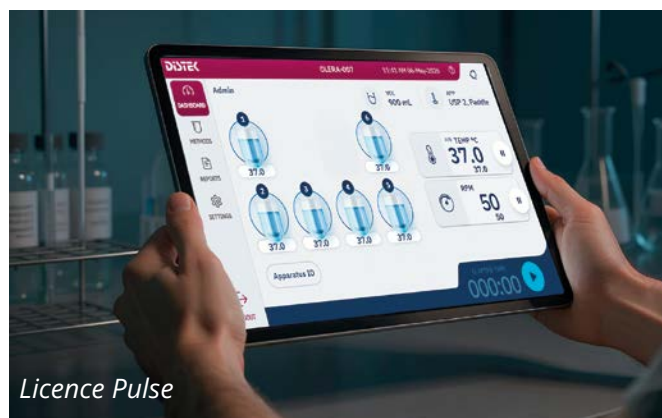

Licence Pulse

- Integrita dat v souladu s 21 CFR Part 11
- Odpadá tisk a archivace dokumentů
- Lokální i síťové instalace

- Vzdálený přístup pro operátory a vedoucí laboratoří
- Rychlý servisní zásah

